


Windows Update による修正プログラムのインストール方法

ここでは、「伝の心 V」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで修正プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心 V」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心 V」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心 V」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上「x」ボタンをマウスでクリックしてください。
- ④「伝の心を停止します。よろしいですか？(パソコンの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。
- ⑤「伝の心 V」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。


(1) Windows のスタートメニューから「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「Windows Update」を順次マウスでクリックしていきます。

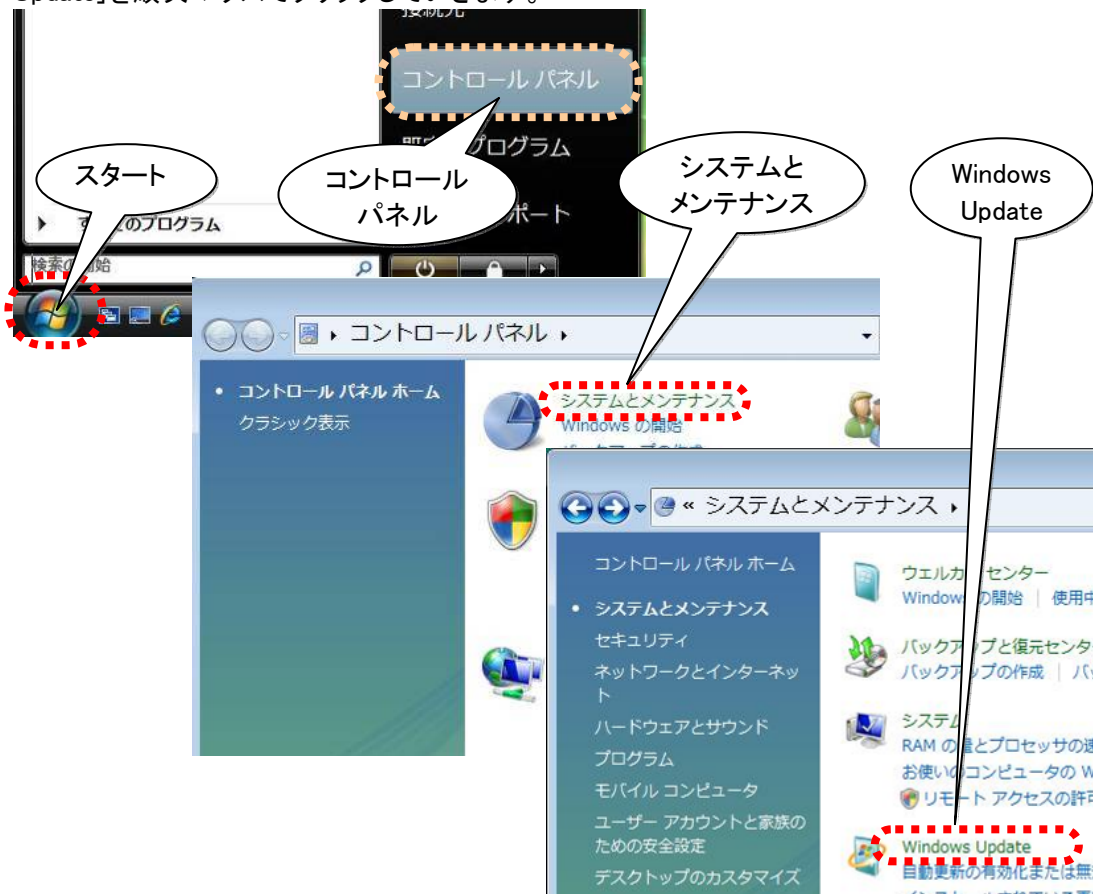


(2) 表示された「Windows Update」画面の「取得する更新プログラム」が「Windows 更新プログラムのみ」の場合、[こちら](#)を参照して、Microsoft Update を入手ください。




- (3) 「Windows Update」画面の「更新プログラムの確認」ボタンをマウスでクリックします。

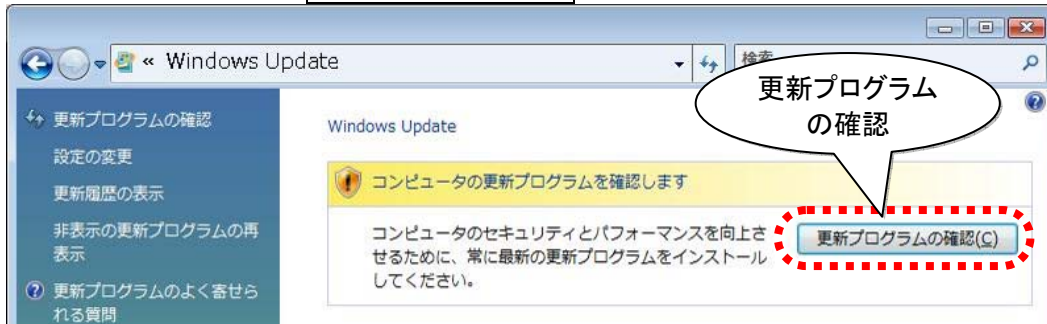


- (4) 利用可能な更新プログラムが検索されます。

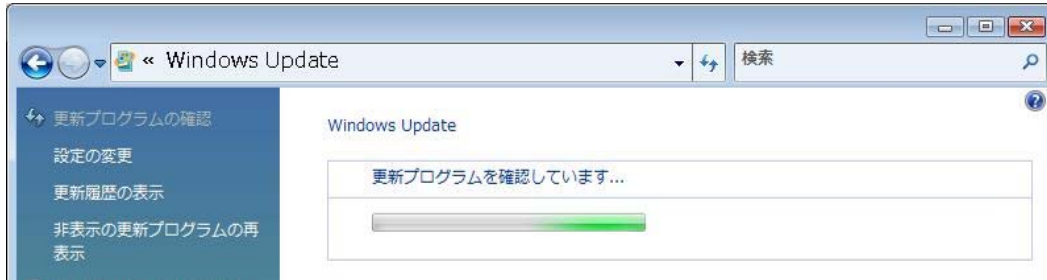

- (5) 「更新プログラムをコンピュータにダウンロードしてインストールします」の表示が現れたら、「更新プログラムのインストール」ボタンをマウスでクリックします。

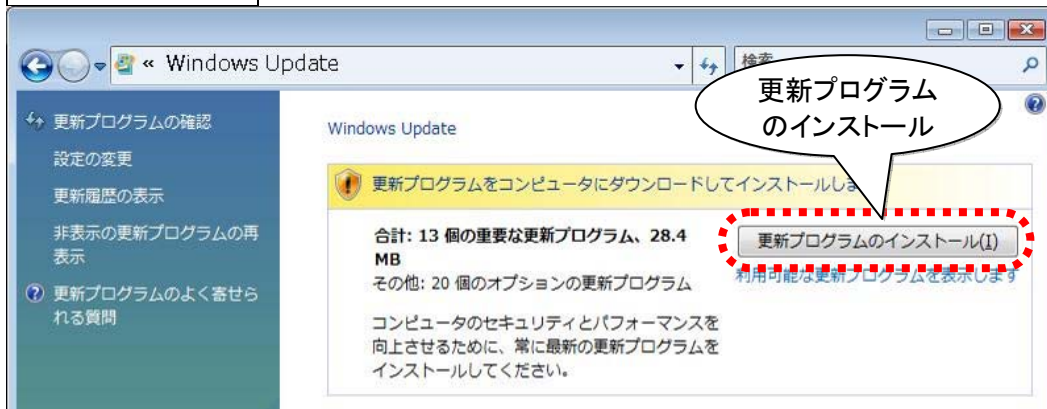

- (6) 更新プログラムのダウンロードとインストールが、実行されます。

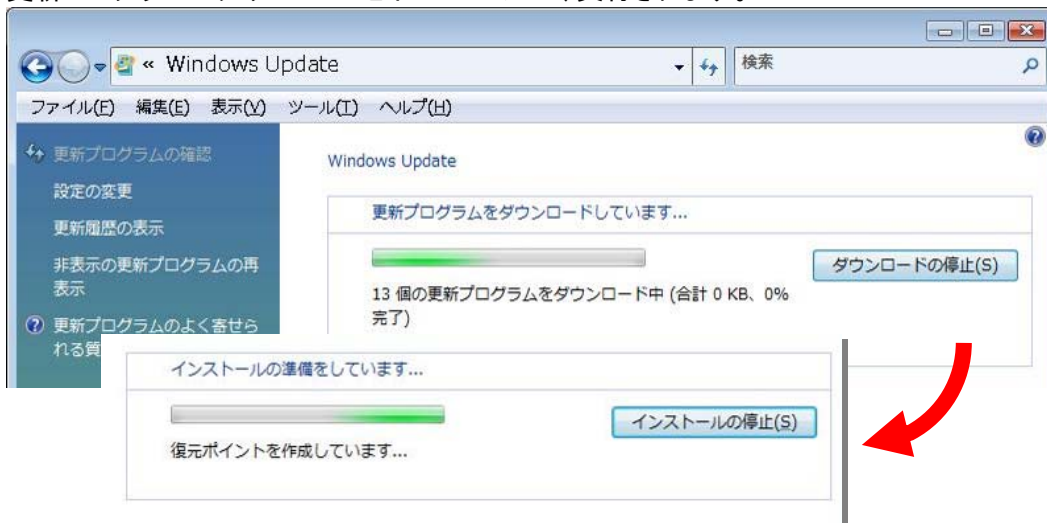

初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなるため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。

また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロードの途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。

このような場合は、時間をおいて再度 Windows Update を行うか、(5)で「利用可能な更新プログラムを表示します」をクリックして、一度にインストールするプログラムの数を減らした上で、インストールを行ってください。

(※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、この時インストールしなかったプログラムや削除したプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能です。)

- (7) 「更新プログラムは正常にインストールされました」表示が現れたら、**今すぐ再起動**ボタンをマウスでクリックします。



(※**今すぐ再起動**ボタンが表示されない場合もあります。この場合、1 度「Windows Update」画面を閉じて、再起動は行わず、(7)を行ってください。)

- (8) 再起動後、(1) (2)を再度行い、「Windows は最新の状態です」と表示されれば終了です。



「更新プログラムをコンピュータにダウンロードしてインストールします」の表示が現れたら、(4)～(6)を、(2)で「Windows は最新の状態です」と表示されるまで繰り返します。

※ Windows Update によるアップデートが困難な場合

Windows Update によるアップデートが上手くいかない場合や、ダウンロードに時間がかかる場合は、下記 Microsoft のホームページより Windows Vista SP1 の DVD を注文ください。


Microsoft 社 オンライン注文

<https://www.microsoft.com/japan/ordercenter/windows/winvistasp1.aspx>


補足： Microsoft Update ソフトウェアのインストール

Microsoft Update は、Windows Update と同じように Windows 用の重要な更新プログラムを入手できるほかに、Office やその他の Microsoft 製品のダウンロードも利用できます。この機能は無償で提供されますが、使用するためには Microsoft Update ソフトウェアをインストールする必要があります。インストールは、下記の手順に従って行います。


- (1) Windows のスタートメニューから「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「Windows Update」を順次マウスでクリックしていきます。
- (2) 「Windows Update」画面の「他の製品の更新プログラムを取得します」ボタンをマウスでクリックします。

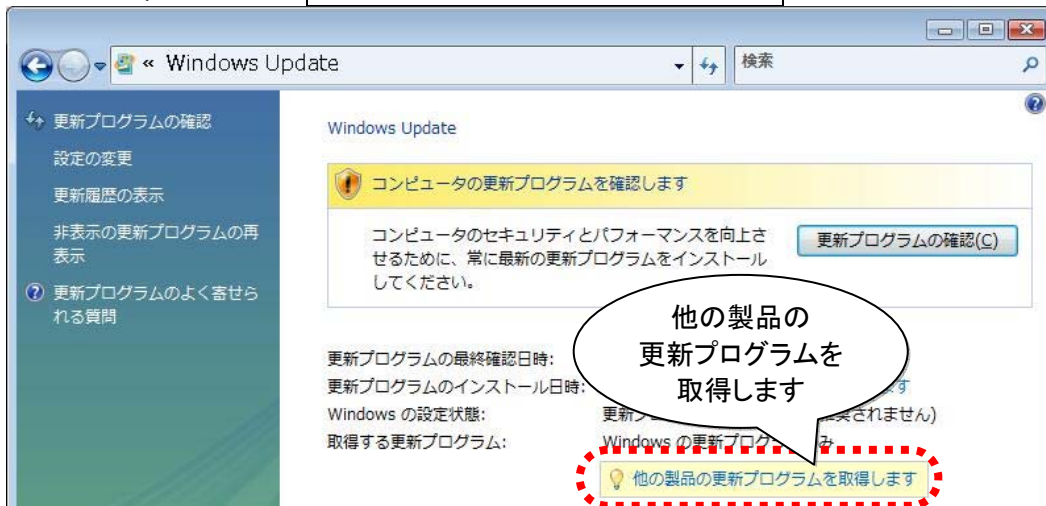


- (3) Windows Update サイトに接続され、下記画面が表示されます。「使用条件に同意します」にチェックを入れて、「次へ」ボタンをマウスでクリックします。

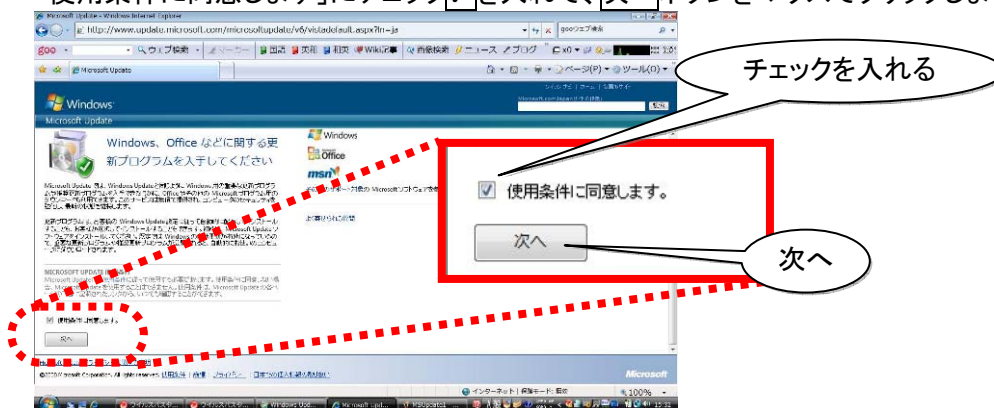


- (4) 「重要な更新プログラムのみインストール」にチェックを入れて、「インストール」ボタンをマウスでクリックします。

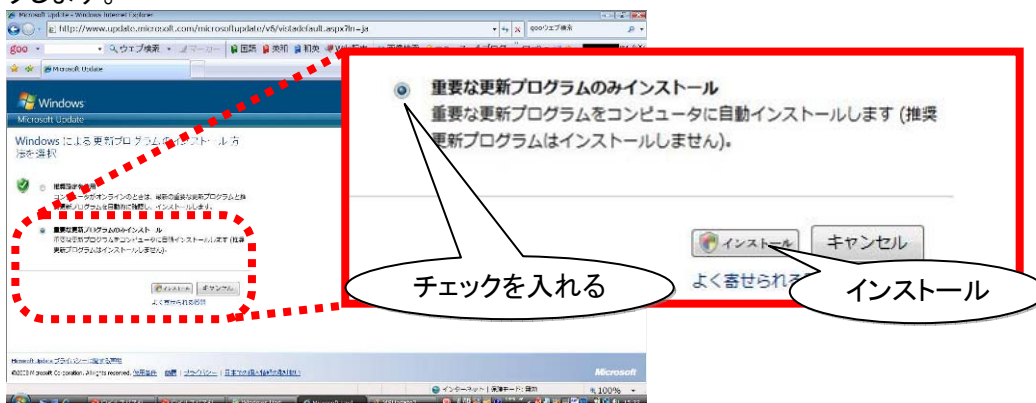

- (5) インストールが終了すると、下記画面を表示します。画面右上の「X」ボタンをマウスでクリックして画面を閉じます。

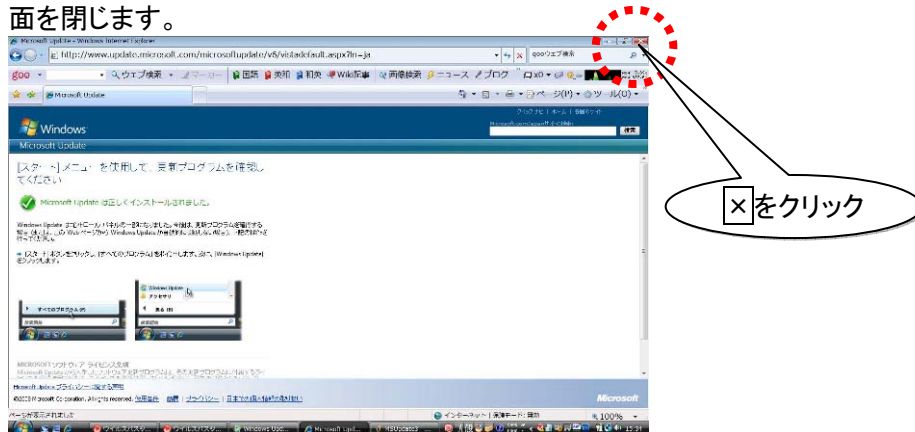


- (6) 「Windows Update」画面の「取得する更新プログラム」が「Microsoft Update からの Windows と他の製品」に変わります。

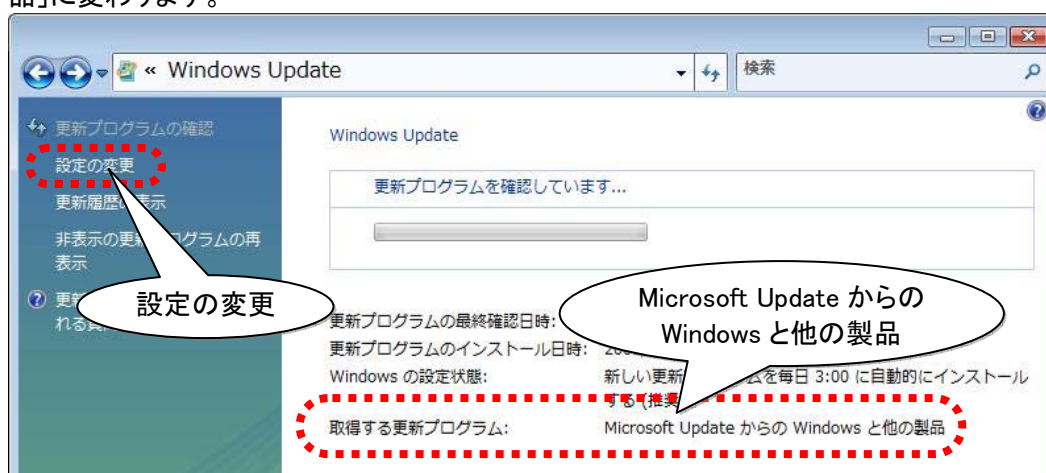

- (7) 次に、「Windows Update」画面の「設定の変更」をマウスでクリックします。

- (8) 「設定の変更」画面が表示されるので、「更新プログラムを確認しない」にチェックを入れて OK ボタンをマウスでクリックします。

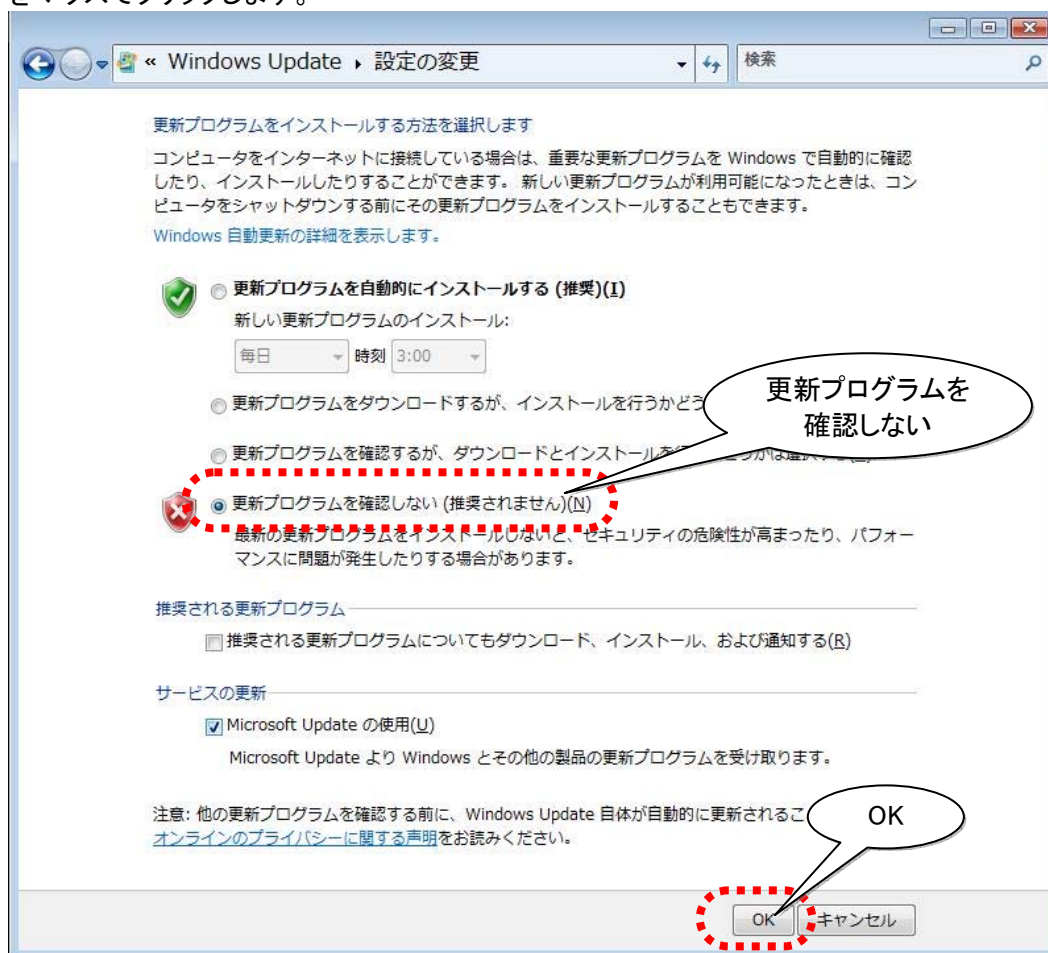

- (9) これで、Microsoft Update のインストールと設定は終わりです。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/current.aspx>